



LinkSymphoKnee

Built on TRUST




„Für meine Patienten hat das LinkSymphoKnee viele Probleme gelöst. Die Größen sind ohne Kompromisse für alle morphologischen Typen geeignet. Das System ist an die Vorlieben des Chirurgen angepasst, anstatt dass sich der Chirurg an das System anpassen muss. Das Instrumentarium ist effizient und rationell, ideal für Krankenhäuser und ambulante Operationszentren.“

– Dr. Matt Austin, MD, Rothman Orthopaedic Institute Philadelphia, PA

¹ Dr. Austin hat im Oktober 2021 im Rothman Orthopaedic Specialty Hospital das erste LSK PS implantiert.

LinkSymphoKnee
Built on TRUST 

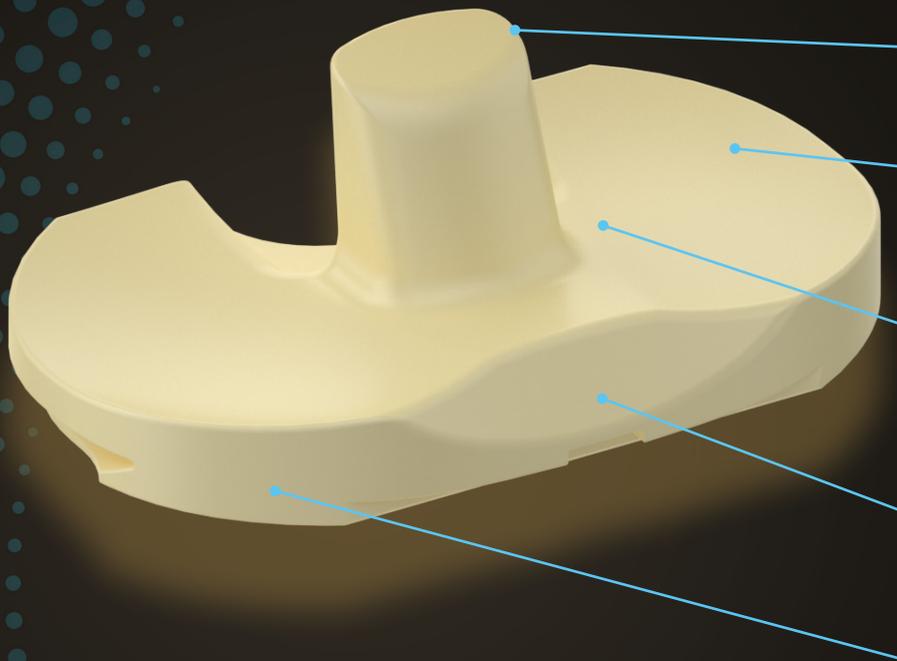

PS/PS+
Zapfenhöhe = 17 mm

PS geführt oder constrained
freie Rotation

PS+: 3° constrained bei
interner, externer Rotation
und Varus/Valgus Bewegung

Ventrale Aussparung
zur Weichteil schonenden
Führung der Patellasehne


E-Dur (HXLPE angereichert
mit Vitamin E¹)

5° geneigter Zapfen
erhöht die Stabilität

Dorsale Fase zur
Verminderung von
Impingement

0° dorsaler Slope

Dorsale und mittige
Schwalbenschwanz-
Verriegelung

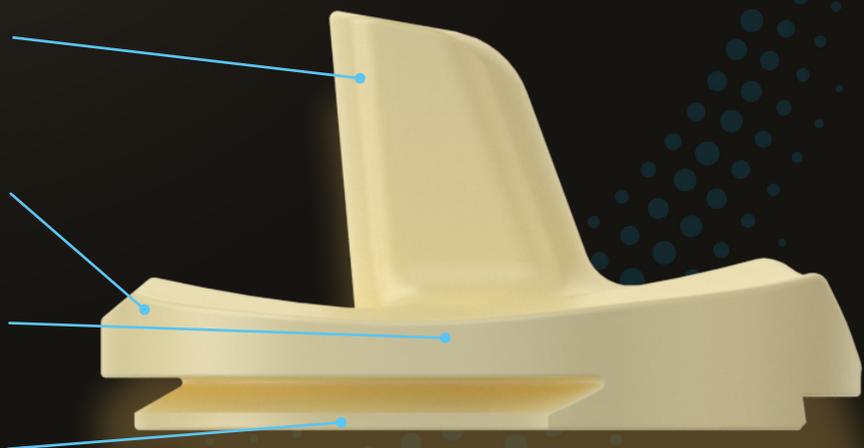

¹ Vernetzung mit einer Gammaluftdosis von 75 kGy und anschließende EtO-Sterilisation.