



LinkSymphoKnee
Built on TRUST




«La rodilla LinkSymphoKnee PS se diseñó para obtener un roll-back femoral predecible. Los componentes también permiten utilizar un inserto PS+ para abordar sin problemas una inestabilidad intraoperatoria del ligamento, sin que esto afecte a la amplitud de movimiento. Nuestros primeros resultados han sido muy satisfactorios, con un movimiento, funcionamiento y alivio del dolor excelentes después de la operación».

– Alejandro G. Della Valle, MD del Hospital for Special Surgery, Nueva York, NY (EE. UU.)¹

¹Dr. Della Valle llevó a cabo la primera implantación de LSK en EE. UU, en el HSS, en agosto de 2021.

LinkSymphoKnee

Built on TRUST

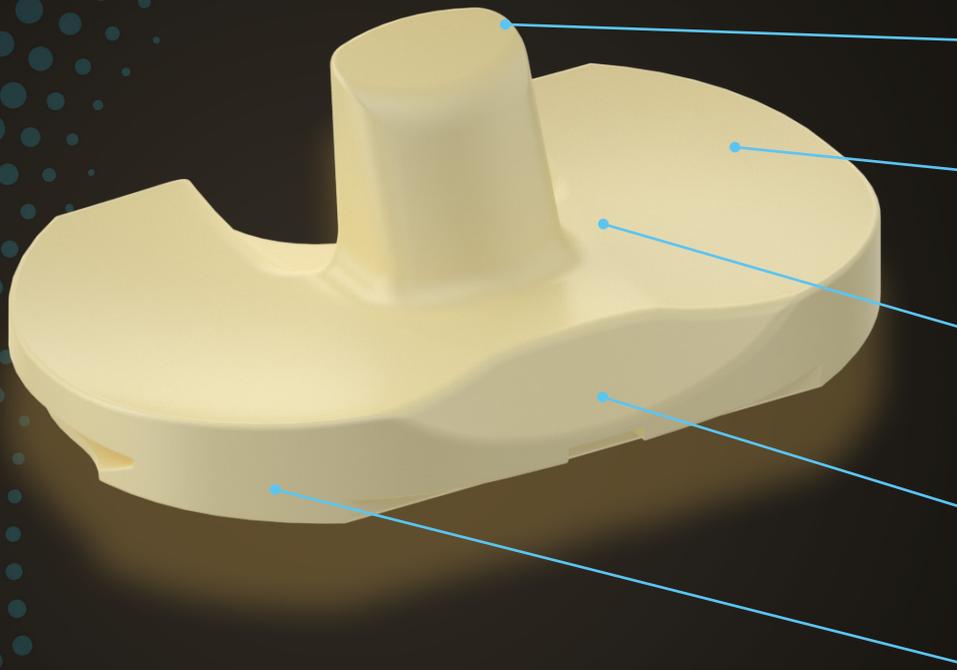

PS/PS+ Altura de salto = 17 mm

PS Constreñido
Libertad de rotación

PS+ Constreñido restringido 3°
IE y VV

Cavidad anterior para envolver el ligamento rotuliano


E-Dur, polietileno impregnado con vitamina E¹

El poste con inclinación de 5° aumenta la estabilidad

Con diseño posterior en bisel para reducir el pinzamiento

Inclinación posterior 0°

Elemento de bloqueo de cola de milano central y posterior

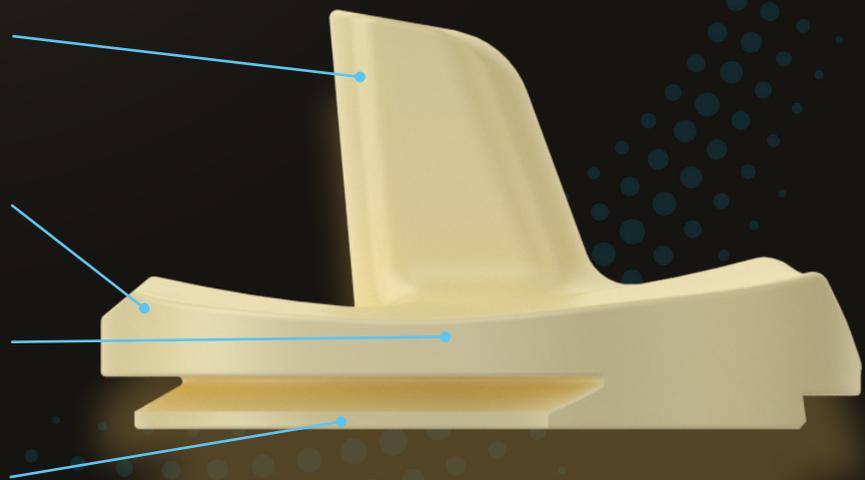

¹Reticulación con una dosis de radiación gamma de 75 kGy en el aire y esterilización posterior con óxido de etileno.