

LINK[®] 

LinkSymphoKnee
Built on TRUST 




“Per i miei pazienti, il LinkSymphoKnee ha risolto molti problemi. Le taglie si adattano a tutti i tipi morfologici senza compromessi. È il sistema che si adatta alle preferenze del chirurgo e non viceversa. La strumentazione è efficiente e snella, semplice”.

– Dr. Matt Austin MD Rothman Orthopaedic Institute Philadelphia, PA

¹Il dottor Austin ha impiantato il primo LSK PS presso il Rothman Orthopaedic Specialty Hospital nell'ottobre 2021.

LinkSymphoKnee

Built on TRUST

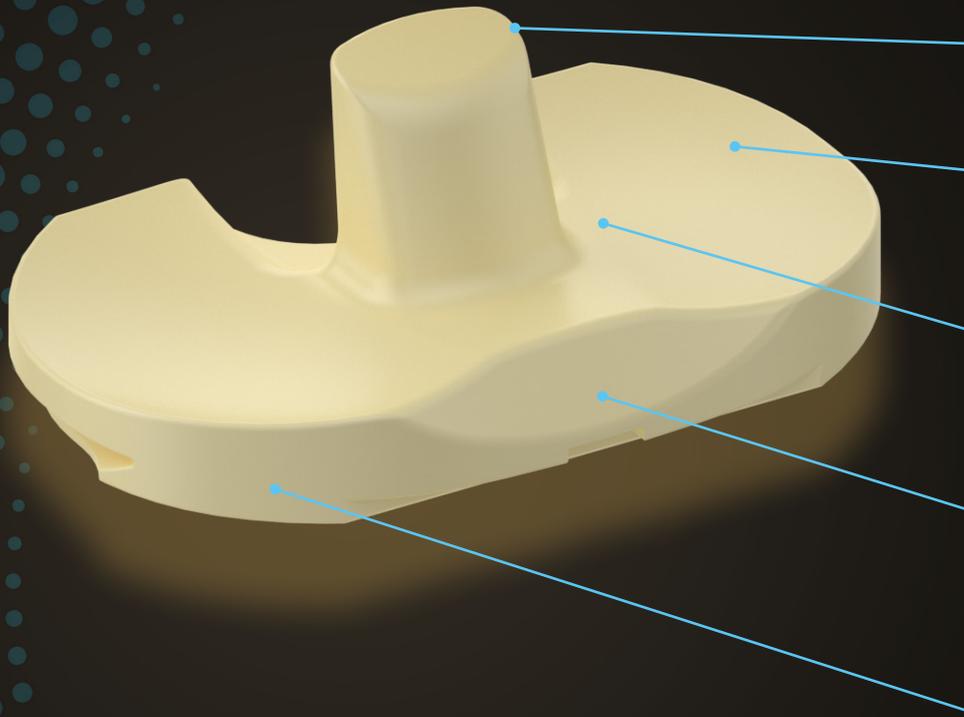

PS/PS+ Jump
height = 17 mm

Libertà di rotazione
del vincolo PS

Inserto PS+
vincolato di 3°
IE e VV

Recesso anteriore
più accogliente per il
tendine rotuleo


Polietilene infuso di
vitamina E E-Dur¹

La camma posteriore
inclinato di 5° aumenta
la stabilità

Smusso posteriore
progettato per ridurre
l'impingement

Slope posteriore di 0°

Sistema di bloccaggio
a coda di rondine
posteriore e centrale

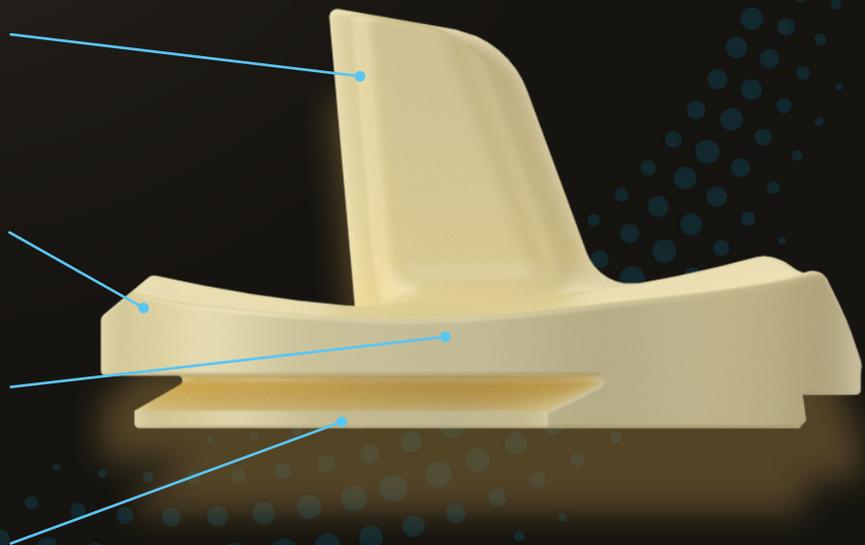

¹Reticolazione con una dose di radiazioni gamma di 75 kGy in aria quindi sterilizzata con EtO.